

do more™

taskaprosthetics.com



10 Nelson Street, Riccarton, Christchurch 8011, New Zealand.

Rev: G

Your grip guide

دليل القبضة

Din guide til greb

Anleitung zu den Griffen

Su guía de agarres

Oteoppaasi

Votre guide des saisies

Handbókin þín um grip

Guida alle prese

Uw grepengids

Din grep-guide

O seu guia de pinças

Ваш путеводитель по схватам

Váš sprievodca zovretím

Din greppguide

Ваш посібник з хватів



Introduction

This guide is designed to help you get the most from your TASKA hand. There are over 20 pre-programmed grips, and you can create your own using the MyTASKA app, which you can find on your preferred app store.

Scan the QR Code for video guides and other resources.

For more information on your TASKA hand talk with your prosthetist, or visit taskaprosthetics.com



do more™

AR مقدمة

تم تصميم هذا الدليل لمساعدتك في الحصول على أقصى استفادة من يد تاسكا. هناك أكثر من 20 قبضة مبرمجة مسبقًا، ويمكنك إنشاء قبضاتك الخاصة باستخدام تطبيق MyTASKA، الذي يمكنك العثور عليه في متجر التطبيقات المفضل لديك. قم بإجراء مسح ضوئي لرمز الاستجابة السريعة (QR) للحصول على أدلة الاستخدام المسجلة بالفيديو والموارد الأخرى.

لمزيد من المعلومات حول يد تاسكا، تحدث مع أخصائي الأطراف الاصطناعية المتابع لحالتك، أو قم بزيارة taskaprosthetics.com

DA Introduktion

Denne guide er designet til at hjælpe dig med at få mest muligt ud af din TASKA hånd. Der findes over 20 forprogrammerede greb, og du kan lave dine egne ved hjælp af appen MyTASKA, som du kan finde i din foretrukne app-butik.

Scan QR-koden for videovejledninger og andre ressourcer.

For mere information om din TASKA hånd snak med din proteselæge, eller se taskaprosthetics.com

DE Einführung

Diese Anleitung soll Ihnen dabei helfen, Ihre TASKA-Hand optimal zu nutzen. Ihre TASKA-Hand besitzt 20 vorprogrammierte Griffe. Zudem können Sie über die im App-Store Ihrer Wahl heruntergeladene MyTASKA-App persönliche Griffe erstellen.

Wenn Sie den QR-Code scannen, erhalten Sie Zugang zu Videoanleitungen und anderen Ressourcen.

Weitere Informationen zu Ihrer TASKA-Hand erhalten Sie im Gespräch mit Ihrem Orthopädietechniker oder bei einem Besuch unserer Website taskaprosthetics.com

ES Introducción

Esta guía ha sido diseñada para sacar el máximo provecho a su mano TASKA. Hay más de 20 agarres previamente programados y puede crear el suyo propio con la aplicación MyTASKA, que puede encontrar en su tienda de aplicaciones preferida.

Escanee el código QR para obtener guías de vídeo y otros recursos.

Para más información sobre su mano TASKA, hable con su especialista en prótesis o visite taskaprosthetics.com

FI Aluksi

Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua saamaan kaiken irti TASKA hand -proteesistasi. Tarjolla on yli 20 esiohjelmointia otetta ja voit luoda omiasi MyTASKA-sovelluksen kautta, jonka voit ladata sovelluskaupastasi.

Skannaa QR-koodi saadaksesi video-oppaita ja muita resursseja.

Lisätietoa TASKA hand -proteesista saat proteesilääkäritäsi tai käymällä osoitteessa taskaprosthetics.com

FR Introduction

Ce guide est conçu pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre main TASKA. Il existe plus de 20 saisies préprogrammées, et vous pouvez créer les vôtres en utilisant l'application MyTASKA, que vous trouverez sur votre magasin d'applications préféré.

Scannez le code QR pour obtenir des guides vidéo et d'autres ressources.

Pour plus d'informations sur votre main TASKA, consultez votre prothésiste ou consultez taskaprosthetics.com

IS Inngangur

Þessi handbók er hönnuð til að hjálpa þér að fá sem mest úr TASKA hendinni þinni. Það eru yfir 20 forforrituð grips og þú getur búið til þín eigin með MyTASKA appinu, sem þú finnur í uppáhalds appversluninni þinni.

Skannaðu QR kóðann fyrir myndbandsleiðbeiningar og önnur úrræði.

Fyrir frekari upplýsingar um þitt TASKA handtalaðu við stoðtækjafræðinginn þinn eða komdu í heimsókn taskaprosthetics.com

IT Introduzione

Questa guida ha lo scopo di aiutarti a sfruttare al massimo la tua mano TASKA. Contiene più di 20 prese preprogrammate; inoltre, puoi crearne altre personalizzate usando l'app MyTASKA scaricabile dal tuo app store preferito.

Scansiona il QR Code per le guide video e altre risorse.

Per ulteriori informazioni sulla tua mano TASKA, parla con il tuo protesista di fiducia oppure visita taskaprosthetics.com

Introduction

Continued >

do more

NL Inleiding

Deze gids is bedoeld om u te helpen het meeste uit uw TASKA hand te halen. Er zijn meer dan 20 voorgeprogrammeerde handgrepen en u kunt uw eigen handgrepen maken met de MyTASKA app, die u kunt downloaden in de app store van uw voorkeur.

Scan de QR-code voor videohandleidingen en andere hulpbronnen.

Neem voor meer informatie over uw TASKA hand contact op met uw prothesist of ga naar taskaprosthetics.com

NO Innledning

Denne guiden er laget spesielt for at du skal kunne få det aller beste ut av din TASKA-hånd. Det finnes over 20 forhåndsprogrammerte grep, og du kan også lage din egen ved hjelp av MyTASKA-appen som du finner i din app store.

Skann QR-koden for videoguider og andre ressurser.

Dersom du ønsker ytterligere informasjon om din TASKA-hånd, snakk med din protesetekniker, eller gå inn på taskaprosthetics.com

PT Introdução

Este guia destina-se a ajudá-lo a tirar o máximo partido da sua mão TASKA. Existem mais de 20 pinças préprogramadas, e pode ainda criar a sua própria usando a app MyTASKA, que encontrará na sua app store preferida.

Leia este código QR para obter guias em vídeo e outros recursos.

Para obter mais informações sobre a sua mão TASKA fale com o seu protésico ou visite taskaprosthetics.com

RU Введение

Данное руководство поможет вам максимально эффективно использовать ваш протез руки TASKA. На ваш выбор предлагается более 20 запрограммированных захватов; кроме того, у вас есть возможность создать свой собственный захват, используя приложение MyTASKA, которое можно найти в нашем предпочитаемом магазине приложений.

Отсканируйте QR-код, чтобы получить доступ к видеoinструкциям и другим ресурсам.

Для получения дополнительной информации о вашем протезе руки TASKA, обратитесь к вашему протезисту или посетите веб-сайт taskaprosthetics.com.

SK Úvod

Táto príručka má pomôcť v tom, aby ste mohli svoju ruku TASKA hand využívať na maximum. K dispozícii je viac ako 20 predprogramovaných zovretí ruky a môžete si vytvoriť aj svoje vlastné pomocou aplikácie MyTASKA, ktorú nájdete vo vami preferovanom obchode s aplikáciami.

Naskenovaním QR kódu získate prístup k videosprievodcom a ostatným materiálom.

Viac informácií o ruke TASKA hand vám poskytne váš protetik alebo môžete navštíviť stránku taskaprosthetics.com

SV Introduktion

Den här guiden har utformats för att hjälpa dig att få ut det mesta av din TASKA hand. Det finns över 20 förprogrammerade greppfunktioner. Utöver dessa kan du skapa dina egna med MyTASKA-appen, som du hittar i din föredragna appbutik.

Skanna av QR-koden för videoguider och annat material.

Tala med din protesläkare för mer information gällande din TASKA hand eller besök taskaprosthetics.com

UK Вступ

Цей посібник допоможе вам максимально ефективно використовувати ваш міоелектричний протез руки TASKA. Протез має понад 20 запрограмованих хватів, а також можливість створювати власні за допомогою мобільного додатку MyTASKA, який можна завантажити з вашого улюбленого магазину додатків.

Відскануйте QR-код, щоб переглянути відеоінструкції та отримати додаткові матеріали.

Для отримання додаткової інформації про міоелектричний протез руки TASKA зверніться до свого протезиста або відвідайте сайт taskaprosthetics.com

Welcome

“For us, everything revolves around delivering **real-life** practicality that improves people’s lives.”

Mat Jury, Founder



AR

مرحبًا

«بالنسبة لنا، كل شيء يدور حول تقديم حلول عملية واقعية تعمل على تحسين حياة الناس.»

مات جوري
مؤسس الشركة

DA

Velkommen

“For os har innovation aldrig handlet om at skabe et stykke ny teknologi - det handler om at levere praktiske virkelige produkter, der forbedrer folks liv.”

Mat Jury
Grundlægger

DE

Herzlich Willkommen

„Für uns ging es bei Innovationen nie darum, eine neue Technologie zu entwickeln - es geht immer darum, lebensnahe Anwendbarkeit zu bieten, die das Leben der Menschen verbessert.“

Mat Jury
Gründer

ES

Bienvenido

«Para nosotros, la innovación nunca ha consistido en crear algo de nueva tecnología, sino en ofrecer practicidad en la vida real que mejore día a día de las personas.»

Mat Jury
Fundador

FI

Tervetuloa

“Meille innovaatio ei ole koskaan ollut uuden tekniikan luomista - se on ihmisten elämän todellisen hyödyn parantamista.”

Mat Jury
Perustaja

FR

Bienvenue

« Pour nous, l’innovation ne s’est jamais bornée à créer un nouvel outil technologique, mais à proposer des produits qui répondent à des considérations pratiques de la vie réelle et améliorent le quotidien des personnes. »

Mat Jury
Fondateur

IS

Velkominn

“Fyrir okkur snýst allt um að skila raunhæf hagkvæmni sem bætir líf fólks.”

Mat Jury
Stofnandi

IT

Benvenuto

“Per noi, l’innovazione non ha mai significato creare un pezzo di nuova tecnologia, bensì - e soprattutto - fornire una praticità nella vita reale che migliori la vita delle persone.”

Mat Jury
Fondatore

NL

Welkom

“Voor ons draait alles om het leveren van praktische oplossingen die het leven van mensen verbeteren.”

Mat Jury
Oprichter

NO

Velkommen

“For oss handler ikke innovasjon om å skape ny teknologi. Det handler om å levere ekte, praktiske funksjoner som bedrer folks liv.”

Mat Jury
Grunnlegger

PT

Bem-vindo

“Para nós a inovação nunca se tratou de criar um objeto de nova tecnologia - o objetivo é promover uma praticidade real que contribua para melhorar as vidas das pessoas.”

Mat Jury
Fundador

RU

Приветствие

«Для нас инновация никогда не заключалась лишь в создании образца новой технологии — речь идёт о реальном и полезном изобретении, улучшающем жизнь людей».

Mat Jury
Основатель

SK

Vitajte

„Inovácie pre nás nikdy neboli o vytvorení novej technológie, ale o dosiahnutí praktickosti v bežnom živote, ktoré zlepší životy ľudí.“

Mat Jury
Zakladateľ

SV

Välkommen

“För oss har innovation aldrig handlat om att skapa ny teknik, utan om att leverera praktiska lösningar som förbättrar människors liv.”

Mat Jury
Grundare

UK

Ласкаво просимо

«Для нас усе зосереджено навколо створення реальної практичної користі, яка покращує життя людей».

Мет Джурі
Засновник

Core grips

The grips you will use for most of your daily activities based on three fundamental grasps.



do more™



القبضات الأساسية

Grundlæggende greb

Hauptgriffarten

Agarres básicos

Perusotteet

Saisies principales

Kjarna grips

Prese principali

Belangrijkste grepen

Hovedgrep

Pinças base

Основные схваты

Základné druhy zovretí

Hårt grepp

Основні хвати

 TASKA™

AR

DA

DE

ES

FI

FR

IS

IT

NL

NO

PT

RU

SK

SV

UK

General Grasp

القبضة العامة للإمساك

Almindeligt greb

Haltegriff

Agarre general

Yleisote

Saisie Standard

Almennt Grasp

Presa generale

Algemene greep

Generelt grep






Preensão geral

Обычный схват

Všeobecné zovretie







Allmänt grepp

Загальный хват

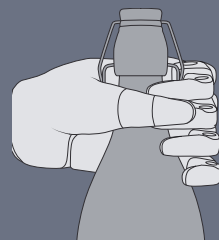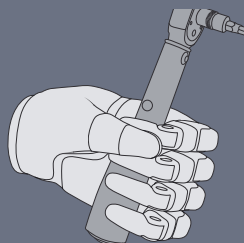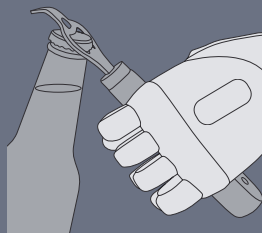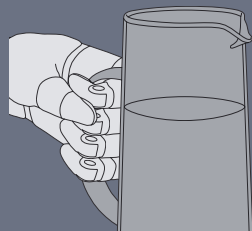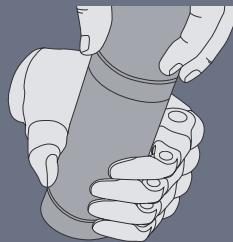

Flexitool



القبضة المرنة
Universalgriff
Flexi-tool
Ferramenta flexível
Рукопожатие
Флекс

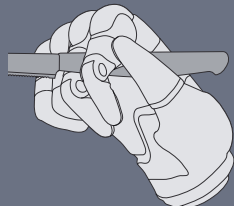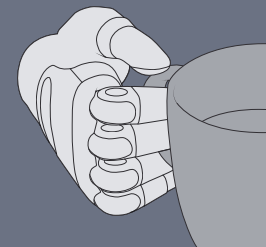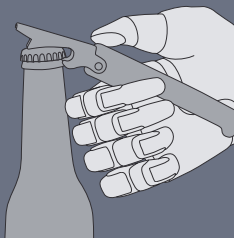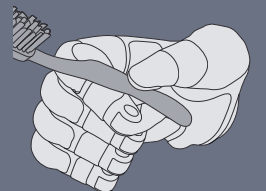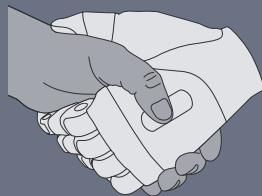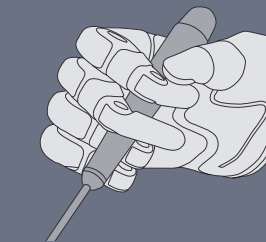

do more™

Pincer

قبضة الكماشة
Tang
Pinzettengriff
Klîpa
Pinza
Puristus
Klemmari
Tang
Knipegrepp
Pinça
Пинцет
Pinzeta
Nyrpgrepp
Клешня

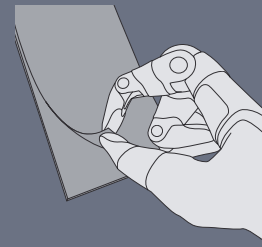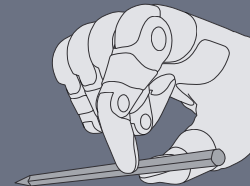

TASKA™

Melanie Rivera Waldman

“

I've been using my TASKA to **find my way back** to the things I love the most. ”

Melanie Rivera Waldman
Actor, yoga teacher, differently
limbed advocate, TASKA Champion.

At her core, Melanie is someone who finds a way. She is on a journey of adaptation and connection with her authentic self.

Read Melanie's full story and meet our other Champions at taskaprosthetics.com



do more™

DE Melanie Rivera Waldman

Schauspielerin, Yoga-Lehrerin,
Limb Difference Inklusions-
botschafterin, TASKA Champion.

“

Ich nutze meine TASKA, um **wieder zu den Dingen zurückzufinden**, die ich am meisten liebe. ”

Melanie ist jemand, die immer einen Weg findet, um ihr Ziel zu erreichen. Sie ist auf einer Reise, sich in ihr neues Leben hineinzufinden, auf einer Reise zu ihrem wahren Ich.

Lesen Sie Melanies Geschichte und lernen Sie auch unsere anderen Champions auf taskaprosthetics.com kennen.

ES Melanie Rivera Waldman

Actriz, profesora de yoga, defensora de las extremidades distintas, TASKA Champion.

“

He usado mi TASKA para **volver a hacer las cosas** que más me gustan. ”

En el fondo, Melanie es una persona que encuentra soluciones. Está en un viaje de adaptación y conexión con su auténtico ser.

Lea la historia completa de Melanie y conozca a nuestros otros campeones en taskaprosthetics.com

Melanie Rivera Waldman

TASKA Champion
continued >

do more™



FR Melanie Rivera Waldman

Actrice, professeure de yoga, défenseuse des personnes handicapées des membres, TASKA Champion.

“ La TASKA me permet de **retrouver le chemin** de mes passions. ”

Melanie est une personne qui puise des ressources au fond d'elle-même. Elle entreprend un voyage d'adaptation et de connexion avec son moi authentique.

Lisez l'histoire complète de Melanie et rencontrez nos autres Champions sur taskaprosthetics.com

IT Melanie Rivera Waldman

Attrice, maestra di yoga, impegnata nel patrocinio legale di persone con arti amputati, TASKA Champion.

“ Uso la mia TASKA per **ritrovare le cose** che amo di più. ”

Melanie è una persona che cerca in sé stessa per trovare nuove risorse, in un percorso di adattamento e connessione con il suo io più profondo.

Leggi la storia completa di Melanie e incontra gli altri Campioni TASKA su taskaprosthetics.com

Dynamic grips

Grips intended to focus on single movements of digits to keep grasping simple and predictable.



do more™



القبضات الديناميكية

Dynamiske greb

Dynamische Griffe

Agarres dinámicos

Dynaamiset otteet

Saisies dynamiques

Dynamísk grips

Prese dinamiche

Dynamische grepen

Dynamiske grep

Pinças dinâmicas

Динамические схваты

Dynamické zovretia

Dynamiskt grepp

Динамічні хвати

TASKA™

AR

DA

DE

ES

FI

FR

IS

IT

NL

NO

PT

RU

SK

SV

UK

Grab & Go

الإمساك والحركة

Løft fra flade

Werkzeuggriff

Agarre «Grab & Go»

Prendre et faire

Grípa og Farðu

Prendi e vai


Grip & Gå

Agarrar e andar

Бери и иди

Snabbgrepp

Взяти та йти

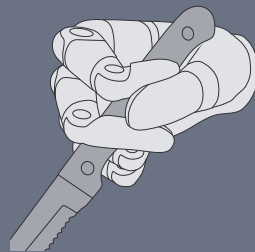

Precision Grasp

قبضة الإمساك الدقيق

Præcisionsgreb

Präzisionsgriff

Agarre de precisión

Tarkkuusote

Saisie de précision

Nákvæmni Grasp

Presa di precisione

Precisiegreep

Presisjongsrep



Preensão de precisão

Точный схват

Presné zovretie

Precisionsgrepp

Точный хват

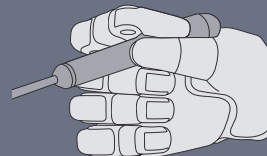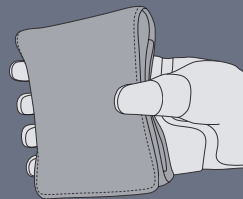

Key Grip

مسكة المفتاح

Nøglegreb

Schlüsselgriff

Agarre llave

Avainote

Saisie clé

Lykla Grip

Presa chiave

Sleutelgreep

Nøkkelgrep




Pinça de chave

Ключ

Zovretie kl'účov

Nyckelgrepp

Ключовий хват

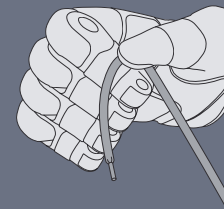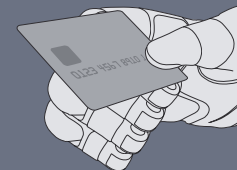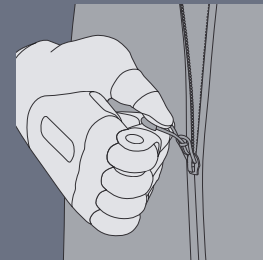

do more™



TASKA™

Tripod

الحامل الثلاثي

Trefingergreb

Dreipunktgriff

Trípode

Kolmesorminen

Þrifót

Treppiede



Drie vingers

Trepunktsgrep

Pinça de tripé

Штатив

Трипод

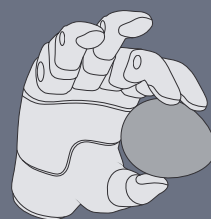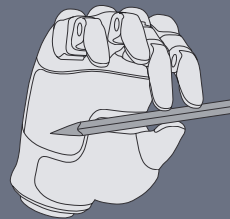

do more™



Hook

المسكة الخطافية

Krog

E-Book Griff

Gancho

Koukku

Crochet

Krók

Uncino

Haak

Hektegrepp




Gancho

Крюк

Hák

Krokgrepp

Гачок

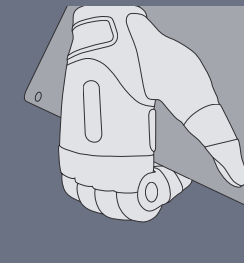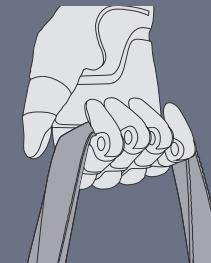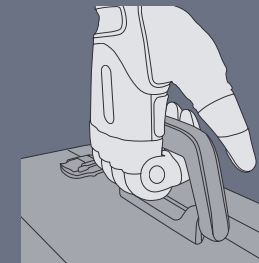

TASKA™

Bryden Zaloum

“

There's simply no other myoelectric hand on the market **that can do what it does.**”

Bryden Zaloum
Passionate car restorer,
TASKA Champion.

Achieving the right balance between comfort and functionality eluded Bryden for more than three decades - until he discovered the TASKA hand.

Read Bryden's full story and meet our other Champions at taskaprosthetics.com



do more™

DE Bryden Zaloum

Passionierter Autobastler,
TASKA Champion.

“

Es gibt einfach keine andere myoelektrische Hand auf dem Markt, die mir **die gleichen Dinge** ermöglicht.”

Das richtige Gleichgewicht zwischen Komfort und Funktionalität vermisste er mehr als drei Jahrzehnte - bis er die TASKA-Hand entdeckte.

Lesen Sie Brydens Geschichte und lernen Sie auch unsere anderen Champions auf taskaprosthetics.com kennen.

ES Bryden Zaloum

Apasionado de la restauración de coches, TASKA Champion.

“

Sencillamente, no hay otra mano mioeléctrica en el mercado que **pueda hacer lo que hace esta.**”

Lograr el equilibrio correcto entre comodidad y funcionalidad ha sido imposible para Bryden durante más de tres décadas, hasta que descubrió la mano TASKA.

Lea la historia completa de Bryden y conozca a nuestros otros campeones en taskaprosthetics.com

Bryden Zaloum

TASKA Champion
continued >

do more™

FR Bryden Zaloum

Restaurateur de voitures passionné,
TASKA Champion.

“
Il n'existe tout simplement
aucune autre main
myoélectrique sur le marché qui
puisse **faire ce qu'elle fait.**”

Bryden n'a pas réussi à trouver le bon
équilibre entre confort et fonctionnalité
pendant plus de trente ans, jusqu'à ce
qu'il découvre la main TASKA.

Lisez l'histoire complète de Bryden et
rencontrez nos autres Champions sur
taskaprosthetics.com

IT Bryden Zaloum

Appassionato restauratore d'auto,
TASKA Champion.

“
Semplicemente, sul mercato
non ci sono altre mani
mioelettriche che **possano fare
ciò che fa** la mano TASKA.”

L'equilibrio giusto tra comodità e
funzionalità è sfuggito a Bryden per più
di tre decenni... finché non ha scoperto la
mano TASKA.

Leggi la storia completa di Bryden e
incontra gli altri Campioni TASKA su
taskaprosthetics.com

Static grips

Natural and resting positions used for supporting objects where dynamic movement is not required.



do more™



القبضات الثابتة

Statiske greb

Statische Griffe

Agarres estáticos

Staattiset otteet

Saisies statiques

Statísk grips

Prese statiche

Statische grepen

Statiske grep

Pinças estáticas

Статические схваты

Statické zovretia

Fast grepp

Статичні хвати

TASKA™

AR

DA

DE

ES

FI

FR

IS

IT

NL

NO

PT

RU

SK

SV

UK

Keyboard

لوحة مفاتيح

Tastatur

Tastatur-Griff

Teclado

Näppäimistö

Clavier

Hljómborð

Tastiera

Toetsenbord

Tastaturrep

Teclado

Клавиатура

Klávesnica

Tangentbord

Клавиатура



Don & Doff

الارتداء والخلع

Af og på

Schmale Hand

Poner y Quitar

Pukeminen & riisuminen

Enfiler/retirer

Don og Doff

Inserire / Estrarre

Ta på & ta av


Colocar / tirar

Лёгкое надевание

и снятие

Nasadiť a zložiť

Дон і Дофф

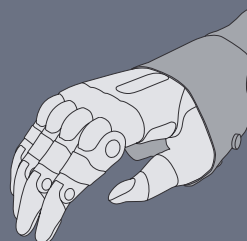

do more™

Pointer

مؤشر

Pointer

Zeigefinger

Apuntador

Finnish

Osoitin

Bendi

Puntatore

Wijzer

Pekefinger


Arontar

Указатель

Ukazovadlo

Pekfinger

Вказівний

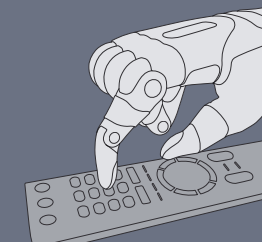

TASKA™



Open Palm

راحة يد مفتوحة

Åben håndflade

Offene Hand

Palma abierta

Avoin kämmen

Main ouverte

Opin löfi

Palmo aperto

Open handpalm

Åpen hånd


Palma aberta

Открытая ладонь

Otvorená dlaň

Öppen handflata

Відкрита долоня

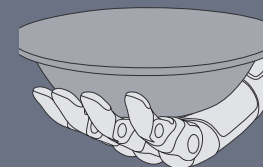

Relaxed

مرتاحة

Afslappet

Entspannter Griff

Relajado

Rento

Relâchée

Afslappaður

Rilassata

Ontspannen

Avslappet

Relaxado

Расслабление

Uvoľnené zovretie

Viloläge

Розслаблений



Nic Hite

“

The TASKA hand can **hold on to a lot more weight** than I thought! ”

Nic Hite
Engineer, gym enthusiast,
TASKA Champion.

Nic has always been a confident person, and believes his TASKA helps him transfer that confidence to others.

Read Nic's full story and meet our other Champions at taskaprosthetics.com



do more™

DE Nic Hite

Ingenieur, sportbegeistert,
TASKA Champion.

“

Die TASKA-Hand kann **viel mehr Gewicht halten**, als ich dachte! ”

Nic war schon immer ein selbstbewusster Mensch, und er glaubt, dass seine TASKA-Hand ihm hilft, dieses Selbstbewusstsein auf andere zu übertragen.

Lesen Sie Nics Geschichte und lernen Sie auch unsere anderen Champions auf taskaprosthetics.com kennen.

ES Nic Hite

Ingeniero, amante del gimnasio,
TASKA Champion.

“

La mano TASKA puede sostener **mucho más peso** del que pensaba! ”

Nic siempre ha sido una persona segura de sí misma y cree que su mano TASKA le permite infundir confianza a los demás.

Lea la historia completa de Nic y conozca a nuestros otros campeones en taskaprosthetics.com

Nic Hite

TASKA Champion
continued >

do more™



FR Nic Hite

Ingénieur, passionné de fitness,
TASKA Champion.

“ La main TASKA peut supporter
un poids nettement supérieur à
ce que j’imaginais ! ”

Nic a toujours été sûr de lui.
Il pense que sa main TASKA l’aide
à transmettre cette confiance
aux autres.

Lisez l’histoire complète de Nic et
rencontrez nos autres Champions sur
taskaprosthetics.com

IT Nic Hite

Ingegnere, appassionato di fitness,
TASKA Champion.

“ La mano TASKA può
sostenere **molto più peso**
di quando pensassi! ”

Nic è sempre stato una persona
sicura di sé e crede che la sua
mano TASKA lo aiuti a trasferire
questa fiducia agli altri.

Leggi la storia completa di Nic
e incontra gli altri Campioni TASKA su
taskaprosthetics.com

Speciality grips

Use specific tools, controls or functions and perform specialty tasks with unique movements.



do more™



القبضات المتخصصة

Specielle greb

Spezialgriffe

Agarres especiales

Erityisotteet

Saisies spéciales

Sérgrein grips

Prese specializzate

Speciale grepen

Spesialgrip

Pinças especializadas

Специальные схваты

Špeciálne zovretia

Specialgrepp

Спеціальні хвати

TASKA™

AR

DA

DE

ES

FI

FR

IS

IT

NL

NO

PT

RU

SK

SV

UK

Apple

تفاحة

Æble

Kugelgriff

Manzana

Omena

Pomme

Epli

Mela

Eple


Maça

Яблоко

Jabłko

Äpple

Яблуко

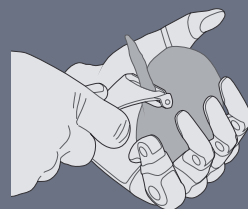

1 Finger Trigger

الضغط بإصبع واحد

1 finger udløser

1-Finger-Auslöser

Activador de 1 dedo

1 sormen liipaisin

Gâchette 1 doigt

1 Fingurkveikja

Trigger 1 dito

Trekker 1 vinger

Utløser med 1 finger


Gatilho de 1 dedo

1 Kypok

Spustenie 1 prstom

1 fingersutlösare

Тригер 1 пальца

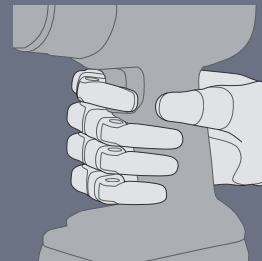

2 Finger Trigger

الضغط بإصبعين

2 finger udløser

2-Finger-Auslöser

Activador de 2 dedos

2 sormen liipaisin

Gâchette 2 doigts

2 Fingurkveikja

Trigger 2 dita

Trekker 2 vinger

Utløser med 2 fingre


Gatilho de 2 dedos

2 Kypok

Spustenie 2 prstami

2 fingersutlösare

Тригер 2 пальца

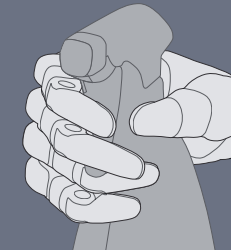

Mouse

ماوس

Mus

Mausgriff

Ratón

Hiiri

Souris

Mús

Muis

Rato

Мышь

Myš

Миша



Grab & Lock

الإمساك والقبض

Grib & Lås

Ergreifen & Festhalten

Agarrar y bloquear

Prendre et verrouiller

Grípa og læsa

Prendi e blocca

Pakken en vergrendelen



Grip og lås

Agarrar e prender

Бери и блокируй

Blockeringsgrepp

Взяти і тримати

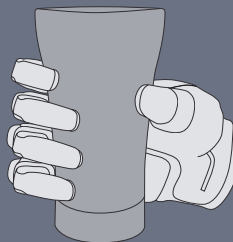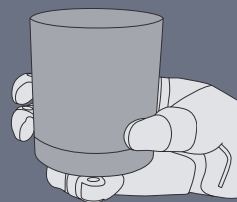

do more™



Rock On

انطلق

Rokkið á

Rock

Коза

Рок зірка



OK

موافق

Allt í lagi

O'кей



TASKA™