

Версія: B

do more™

taskaprosthetics.com/support



 **TASKA**[™]
by eqwal

TASKA (TACKA) QWD

Посібник користувача
ущільнювального кільця та
закладної манжети



Уповноважений представник в Україні:
ТОВ «Кратія Медтехнік»
04107, м. Київ, вул. Багговутівська, буд. 17-21, Україна
Тел.: 0 800 21-52-32
Електронна пошта: uarep@cratia.ua, ЄДРПОУ: 38670845



TASKA Протетікс Лтд

10 Нельсон Стріт, Рікартон, Крайстчерч 8011, Нова Зеландія

 **TASKA**[™]
by eqwal



Відскануйте цей QR-код, щоб отримати більше корисних матеріалів від компанії TASKA.

—
При використанні сумісного міоелектричного протеза TASKA (TASKA) (далі по тексту – TASKA) з ущільнювальним кільцем, що поставляється компанією TASKA, ви можете занурювати у воду і зап'ясток, і протез руки до рівня першого отвору на вашому протезі.

Детальнішу інформацію про належне використання та обмеження щодо використання міоелектричного протеза TASKA ви знайдете в Посібнику з використання міоелектричного протеза TASKA.

ст4

Характеристики


ст6

Догляд за зап'ястком


ст8

Попередження

Характеристики

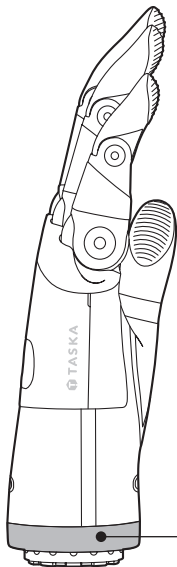

А - Ущільнювальне кільце

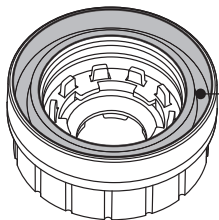

В - Ущільнювана поверхня на Закладній Манжеті TASKA

Догляд за зап'ястком

Під час використання міоелектричного протеза руки TASKA необхідно дбати про збереження водонепроникної прокладки. До комплекту Закладної Манжети входить ущільнювальне кільце, яке кріпиться на протезі руки, та ущільнювальна поверхня на самій Закладній Манжеті (див. схему на стор. 5). Регулярно перевіряйте ці деталі на наявність пошкоджень, таких як розриви або глибокі подряпини, які можуть призвести до порушення герметичності.

Регулярно очищайте ущільнювальне кільце та ущільнювальні поверхні на Закладній Манжеті, протираючи їх м'якою вологою тканиною.

Якщо ви використовуєте комплект ущільнювальних кілець MC, зверніть увагу, що він сумісний лише з кінцевою кришкою передпліччя MC. Для отримання інструкцій з догляду за ущільнювальною поверхнею цього компонента дивіться відповідний посібник користувача.

Якщо ви використовуєте зап'ястковий ротатор і помічаєте, що швидкість обертання зап'ястка з часом сповільнилась, зверніться до свого практикуючого лікаря за порадою щодо змащування ущільнювального кільця.

Попередження

- Компанія TASKA не несе відповідальності за водонепроникність кукоприймальної гільзи, до якої буде кріпитися Ваш міоелектричний протез TASKA. Просимо Вас обговорити питання щодо рівня водонепроникності гільзи з Вашим практикуючим лікарем.
- Якщо Ви помітили пошкодження ущільнювального кільця або ущільнювальних поверхонь, можливо, порушено водонепроникність прокладки. Не занурюйте протез руки у воду вище зап'ястка і зверніться до свого практикуючого лікаря.
- Якщо на електронних компонентах протеза руки або на Закладній Манжеті є сліди вологи, ретельно просушіть протез руки перед тим, як під'єднати його знову. Якщо волога з'являється регулярно, зверніться до свого практикуючого лікаря.
- Максимальна вага, яку Ви можете переносити за допомогою Вашого міоелектричного протеза TASKA або будь-якого іншого протеза руки, під'єданого до зап'ястка TASKA, становить 20 кг (kg).
- Недотримання цих вказівок може призвести до анулювання гарантії (докладну інформацію дивіться в гарантійному документі).
- Строк експлуатації Закладної Манжети становить 5 років. Строк експлуатації ущільнювальних кілець становить 1 рік, тому вони підлягають заміні під час щорічного сервісного обслуговування міоелектричного протеза TASKA.

- Для отримання актуальної інформації щодо відповідності вимогам та сумісності відвідайте веб-сайт taskaprosthetics.com. У разі виникнення небезпечного інциденту, пов'язаного з цим пристроєм, слід повідомити про це компанію TASKA і компетентний орган країни, в якій ви перебуваєте.
- Цей виріб є електричним пристроєм, тому його не слід утилізувати разом із побутовими відходами. Для отримання інформації щодо повернення та збору відходів зверніться до місцевих органів влади.



Маркування продукції - глосарій символів

Увага: наведена нижче таблиця символів носить виключно інформативний характер - деякі символи можуть не застосовуватися. Для отримання інформації про застосовні символи дивіться основну етикетку виробу, прикріплену до виробу.

СИМВОЛ	НАЗВА
	Виробник
	Уповноважений представник в Європейському Союзі
	Дата виготовлення
	Код партії
	Номер за каталогом
	Серійний номер
	Крихке, поводитися обережно
	Вгору
	Користуйтеся інструкцією із застосування
	Попередження

	Медичний виріб
	Маркування CE
	Статус потоку утилізації відходів/води електричного та електронного обладнання (WEEE)
	Глобальний торговий номер товарної одиниці
	Bluetooth
	Знак відповідності вимогам Федеральної комісії з питань зв'язку
	Знак відповідності нормативним вимогам
	Знак відповідності електронним стандартам Нової Зеландії
	За допомогою камери мобільного пристрою відскануйте QR-код
	Унікальний ідентифікатор пристрою
	Знак відповідності згідно законодавства України