

Fiducia senza compromessi.

Il TASKA CX™ è la mano destinata a svolgere un ruolo importante nella vita quotidiana degli utenti.

Controllo di precisione

L'innovativo design del motore permette agli utenti di eseguire attività più rapidamente e con maggiore precisione.

Tocco capacitivo

Tutte le punte delle dita, pollice compreso, dispongono del tocco capacitivo e sono utilizzabili su qualsiasi touchscreen.

Punte delle dita sostituibili con un clic

Le punte delle dita possono essere sostituite facilmente con un unico, semplice clic.

Layout intuitivo dei pulsanti

Per passare da una presa all'altra, controllare il Bluetooth™ e molto altro ancora grazie al pannello pulsanti dal design ergonomico.

Coperture personalizzabili

Le coperture di ricambio sono disponibili in un'ampia gamma di colori e design.

Design raffinato

Le linee ben definite e i pulsanti discreti per la flessione del polso potenziano il look.



Per ulteriori informazioni, visitare il sito taskaprosthetics.com

La mano protesica **più avanzata** disponibile sul mercato.

La **TASKA CX** semplifica le attività quotidiane, offrendo all'utente una maggiore sensazione di connessione grazie al controllo di precisione, all'estetica raffinata e alle funzionalità personalizzabili.

Robusta e versatile

- Blocco nocche antiurto.
- Rilascio delle nocche resettabile: affidabilità e resistenza.
- Possibilità di svolgere un'ampia gamma di attività quotidiane.
- Tutta la robustezza che puoi aspettarti da TASKA.

Impermeabile

- Mai più fragili guanti protettivi, grazie alla classificazione IP67.
- Lavaggio di entrambe le mani con acqua e sapone, facilmente e con fiducia.
- Possibilità di svolgere tutte le attività quotidiane: lavare i piatti, pulire l'auto ecc.
- Opzione del polso disponibile con la tecnologia impermeabile TASKA HydroSeal™, che consente l'immersione ben oltre il polso.

Semplice

- Dita flessibili per prese affidabili, pulsante di blocco per la sicurezza e il controllo, pollice motorizzato e prese personalizzabili grazie alla app MyTASKA.
- Sistemi di controllo intuitivi, compatibilità con il riconoscimento pattern e layout dei pulsanti migliorato.
- Flessione del polso integrata.

Opzioni

- Polso a scollegamento rapido (QDW) o a basso profilo (LP).
- Disponibile nelle taglie Small e Medium.
- Base di colore nero o sabbia.
- È disponibile un'ampia gamma di coperture.

Garanzia e manutenzione


- 2 anni di garanzia standard (estendibile a 5 anni).
- Manutenzione annuale gratuita.
- Durante tutti gli interventi di manutenzione e riparazione, vengono fornite unità a noleggio.

Contenuto della confezione

- Copertura e punte delle dita di ricambio.
- Kit collare di laminazione (solo opzione LP).

Tutte le mani TASKA sono compatibili con un'ampia varietà di componenti mioelettrici. Per tutti i dettagli, consultare il sito TASKA.

Dimensioni e pesi

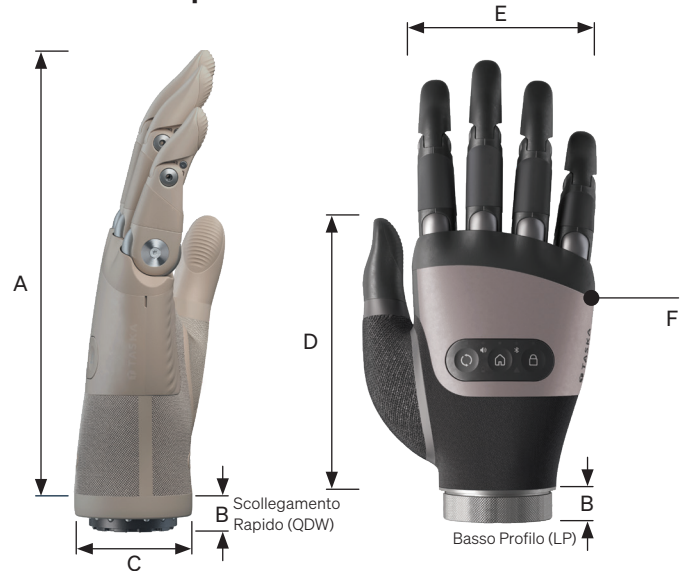

DIMENSIONI		SMALL	MEDIUM
A	Lunghezza mano	(QDW) 172 mm (LP) 168 mm	180 mm 176 mm
B	Dalla base della mano alla base del polso	(QDW) 16 mm (LP) 12,5 mm	16 mm 12,5 mm
C	Diametro al polso	48 mm	54 mm
D	Lunghezza punta pollice	(QDW) 112 mm (LP) 108 mm	114 mm 110 mm
E	Larghezza del palmo	76 mm	83 mm
F	Circonferenza delle nocche	184 mm (7 ³ / ₄ "	197 mm (7 ³ / ₄ "

TABELLA DELLE SPECIFICHE PRINCIPALI *	
Carico massimo trasportabile	20 kg
Forze di presa	Pollice 24 N Dito 13 N
Velocità delle dita	Pollice 0,52 s o 120°/s Dito 0,7 s o 120°/s Rotatore del pollice 0,55 s o 160°/s
Apertura massima	Small 100 mm (3,94") Medium 110 mm (4,33")
Raggio di rotazione del polso	(QDW) Illimitato (LP) 300°
Posizione del blocco di estensione polso	15°
Posizione del blocco di flessione polso	25°
Categoria di impermeabilità	IP67
Intervallo di temperatura operativa	Da -10°C a 45°C (da 14°F a 113°F)
Tensione di funzionamento	7,4 V (nominale)
Peso	Small (QDW) 471 grammi (LP) 430 grammi
	Medium (QDW) 533 grammi (LP) 481 grammi