

Confiance sans compromis.

TASKA CX™

Entièrement submersible

Utilisation de la technologie d'étanchéité Hydroseal de TASKA.

Compatible avec les écrans tactiles

La technologie tactile capacitive sur tous les doigts peut être utilisée sur n'importe quel écran tactile classique.

Protection contre les dommages

Bloc de suspension breveté à absorption des chocs, conçu pour résister aux chocs du quotidien.

Une conception anatomique

Avec des proportions naturelles, des courbes anthropomorphes et des mouvements fluides et silencieux.

Contrôle intuitif

Les modifications de prise en main et le verrouillage sont accessibles via les MyoTriggers ou le panneau des boutons.

Flexion du poignet intégrée

La main multi-articulée la plus légère au monde, avec flexion et extension du poignet réglables.



do more™

 **TASKA™**
by eqwal.

La prothèse de main la plus avancée du marché.

La TASKA CX allie design **raffiné** et performances **fiables**. Entièrement étanche et multi-articulée, elle est dotée d'une rotation motorisée du pouce, d'une flexion intégrée du poignet et d'une conception légère pour une expérience **enrichissante** au quotidien.

Options

- Poignet à déconnexion rapide (QDW) ou à bord surbaissé (LP).
- Disponible en petite taille et taille moyenne.
- Disponible en noir et sable.
- Large gamme de plaques supérieures.

Compatibilité

- Système TASKA PowerCore, bagues de doublage, joints et gants TASKA.
 - Grande variété de composants myoélectriques.
- Consultez taskaprosthetics.com pour plus de détails.

Garantie et entretien

- Garantie standard de 2 ans (extension jusqu'à 5 ans).
- Entretien annuel gratuit.
- Nous vous prêtons un équipement pendant toute la durée de maintenance et de réparation.

Contenu du pack

- Plaque supérieure & embouts de saisie de rechange.
- Kit de bague de doublage (bord surbaissé uniquement).


Assistance

- L'application MyTASKA peut être utilisée pour configurer, personnaliser et s'entraîner sur n'importe quelle main TASKA.
- Un soutien pédagogique est disponible par le biais de la TASKA Learning Academy.
- Un support commercial est assuré pendant toute la durée de vie du produit.

Pour en savoir plus, contactez votre représentant TASKA local ou consultez le site taskaprosthetics.com

do more™

Dimensions et poids

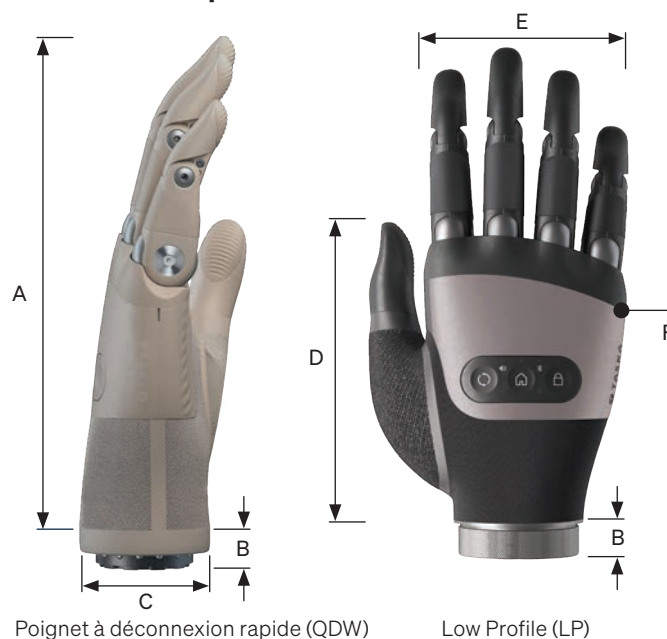

DIMENSIONS			S	M
A	Longueur de la main	(QDW) (LP)	172 mm 168 mm	180 mm 176 mm
B	De la base de la main à la base du poignet	(QDW) (LP)	16 mm 12,5 mm	16 mm 12,5 mm
C	Diamètre au niveau du poignet		48 mm	54 mm
D	Longueur de l'extrémité du pouce	(QDW) (LP)	112 mm 108 mm	114 mm 110 mm
E	Largeur de paume		76 mm	83 mm
F	Circonférence de l'articulation		184 mm (7¼")	197 mm (7¾")

TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS CLÉS			
Capacité de charge maximum		25 kg	
Force de saisie	Pouce	Jusqu'à 29 N	
	Doigt	Jusqu'à 23 N	
Vitesse des doigts	Pouce	0,52 s ou 120°/s	
	Doigt	0,7 s ou 120°/s	
	Rotateur du pouce	0,55 s ou 160°/s	
Ouverture maximum	S	100 mm (3,94")	
	M	110 mm (4,33")	
Plage de rotation du poignet		(QDW) (LP)	Illimité 300°
Position de verrouillage du poignet en extension		15°	
Position de verrouillage du poignet en flexion		25°	
Indice d'étanchéité		IP67	
Températures d'utilisation		-10° C à 45° C (14° F à 113° F)	
Tension de service		7,4 V (nominal)	
Poids	S	(QDW)	471 g
		(LP)	430 g
	M	(QDW)	533 g
		(LP)	481 g

TASKA
by eqwal