

Fiducia senza compromessi.

TASKA CX™

Completamente impermeabile

Grazie alla tecnologia di impermeabilizzazione Hydroseal di TASKA.

Compatibile con i touchscreen

La tecnologia touch capacitiva su tutte le dita può essere utilizzata su qualsiasi schermo touch comune.

Protezione dai danni

Blocco di protezione per le nocche brevettato e ammortizzante, progettato per resistere agli urti quotidiani.

Design anatomico

Con proporzioni naturali, curve antropomorfe e movimenti fluidi e silenziosi.

Controllo intuitivo

Le modalità di regolazione e bloccaggio dell'impugnatura sono accessibili tramite MyoTriggers o il pannello pulsanti.

Flessione del polso integrata

La mano multiarticolata più leggera al mondo, con flessione ed estensione del polso regolabili.



do more™

 **TASKA™**
by eqwal

La mano protesica **più avanzata** disponibile sul mercato.

La TASKA CX unisce un design **raffinato** a prestazioni **eccellenti**. Completamente impermeabile e multiarticolata, è dotata di rotazione motorizzata del pollice, flessione del polso integrata e struttura leggera per un'esperienza **ottimale** ogni giorno.

Opzioni

- Polso a scollegamento rapido (QDW) o Basso profilo (LP).
- Disponibile nelle taglie Small e Medium.
- Disponibile nei colori nero e sabbia.
- È disponibile un'ampia gamma di coperture.

Compatibilità

- Sistema TASKA PowerCore, collari di laminazione, anelli di tenuta e guanti TASKA.
 - Un'ampia varietà di componenti mioelettrici.
- Per maggiori dettagli, visitare il sito taskaprosthetics.com.

Garanzia e manutenzione

- 2 anni di garanzia standard (estendibile a 5 anni).
- Manutenzione annuale gratuita.
- Durante tutti gli interventi di manutenzione e riparazione, vengono fornite unità a noleggio.

Contenuto della confezione


- Copertura e punte delle dita di ricambio.
- Kit collare di laminazione (solo opzione LP).

Assistenza

- L'app MyTASKA può essere utilizzata per configurare, personalizzare e allenarsi con qualsiasi mano TASKA.
- Il supporto didattico è disponibile tramite la TASKA Learning Academy.
- L'assistenza sul mercato è fornita per tutta la durata di vita del prodotto.

Per saperne di più, contattare il proprio rappresentante TASKA di zona o visitare il sito taskaprosthetics.com

Dimensioni e pesi

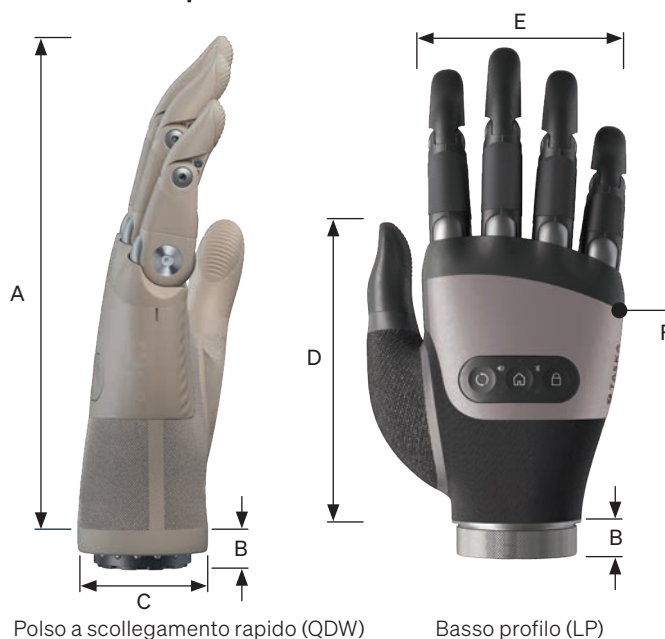

DIMENSIONI			SMALL	MEDIUM
A	Lunghezza della mano	(QDW) (LP)	172 mm 168 mm	180 mm 176 mm
B	Dalla base della mano alla base del polso	(QDW) (LP)	16 mm 12,5 mm	16 mm 12,5 mm
C	Diametro al polso		48 mm	54 mm
D	Lunghezza della punta del pollice	(QDW) (LP)	112 mm 108 mm	114 mm 110 mm
E	Larghezza del palmo		76 mm	83 mm
F	Circonferenza delle nocche		184 mm (7¼")	197 mm (7¾")

TABELLA DELLE SPECIFICHE PRINCIPALI			
Carico massimo trasportabile			25 kg
Forze di presa	Pollice Dito		Fino a 29 N Fino a 23 N
Velocità delle dita	Pollice Dito Rotatore del pollice		0,52 s or 120°/s 0,7 s or 120°/s 0,55 s or 160°/s
Apertura massima	Small Medium		100 mm (3,94") 110 mm (4,33")
Raggio di rotazione del polso	(QDW) (LP)		Illimitato 300°
Posizione del blocco di estensione polso			15°
Posizione del blocco di flessione polso			25°
Categoria di impermeabilità			IP67
Intervallo di temperatura operativa			Da -10 °C a 45 °C (da 14 °F a 113 °F)
Tensione di funzionamento			7,4 V (nominale)
Peso	Small	(QDW) (LP)	471 g 430 g
	Medium	(QDW) (LP)	533 g 481 g

do more™

TASKA
by eqwal